

Carte de formes

SR Phonares II
SR Phonares II Typ
SR Phonares II Lingual

Des dents prothétiques haut
de gamme en composite



Making People Smile*

* Vous donner le sourire


Critères de sélection

Dents antérieures

Conçues pour correspondre à l'âge et aux caractéristiques du patient

Une procédure de sélection simple

La disposition claire des formes permet une sélection sur la base de critères spécifiques au patient.

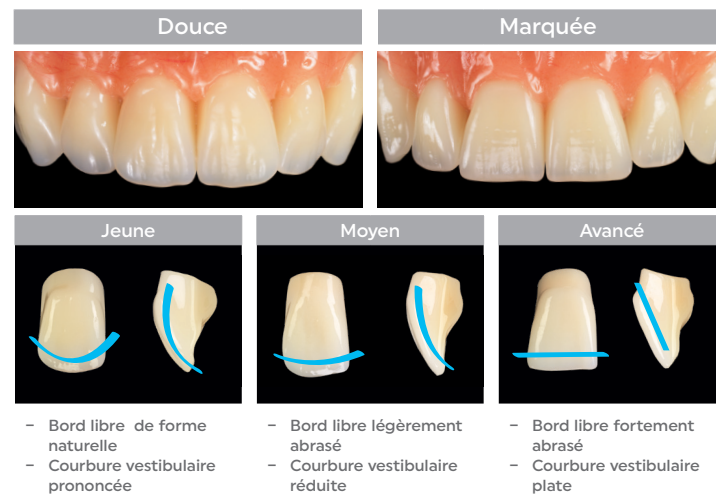

Outre la teinte, la forme et la taille des dents antérieures doivent être adaptées aux caractéristiques individuelles du patient. La gamme SR Phonares II propose 18 formes maxillaires et 6 formes mandibulaires pour la zone antérieure.

Dans la mesure du possible, les dents antérieures doivent être choisies en présence du patient, en fonction de ses caractéristiques anatomiques et vestibulaires. Les méthodes suivantes sont recommandées pour faciliter la procédure de sélection :

Au cabinet dentaire

FormSelector

SR Phonares II FormSelector permet une sélection rapide, facile et ciblée de la dent antérieure appropriée.

Étape 1 : Déterminez la largeur interalaire du nez à l'aide de l'alamètre Facial Meter. Sélectionnez une taille appropriée dans le tableau.

Étape 2 : Après avoir identifié la bonne catégorie de taille, sélectionnez la forme de dent souhaitée, douce ou marquée, en fonction de la forme du visage du patient.

Étape 3 : Sélectionnez la tranche d'âge des dents en fonction de la courbure incisale et vestibulaire des dents SR Phonares II.

Au laboratoire de prothèse

Analyse du modèle

Déterminez les points de référence suivants à l'aide d'une analyse de modèle :

a] Position des canines :

Repérer les deux premières papilles palatines ; le milieu de la surface vestibulaire des canines maxillaires doit se situer à 9 mm de leur extrémité.

b] Position des incisives centrales :

La face vestibulaire des incisives centrales sera située à 7 mm du centre de la papille incisale.

La longueur de l'arcade mesurée entre ces trois points peut servir de référence pour choisir sur la carte de formes le set de dents antérieures d'une largeur adaptée.

Critères de sélection

Dents postérieures

La gamme SR Phonares II comprend deux lignes de dents postérieures

SR Phonares II Typ

Grâce à leur concept d'occlusion, les dents SR Phonares II Typ sont polyvalentes pour une utilisation en prothèse complète et partielle.

Occlusion conventionnelle



"Une dent/deux dents"




SR Phonares II Lingual

Les formes des SR Phonares II Lingual tiennent compte des principes de base de l'occlusion lingualée. Avec cette conception spécifique, l'occlusion lingualée est parfaitement adaptée aux prothèses implanto-portées.

Occlusion lingualée



"Une dent/une dent"

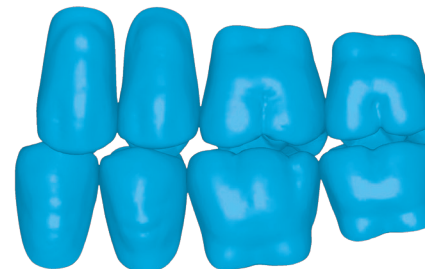

OU

"Une dent/deux dents"



SR Phonares II

Douces

	Jeune	Moyen	Avancé
Petites	S61	S71	S81
Moyennes	S62	S72	S82
Grandes	S63	S73	S8 3
	L50	L51	L52

SR Phonares II




Marquées



SR Phonares II Typ

SR Phonares II Lingual

Dents postérieures

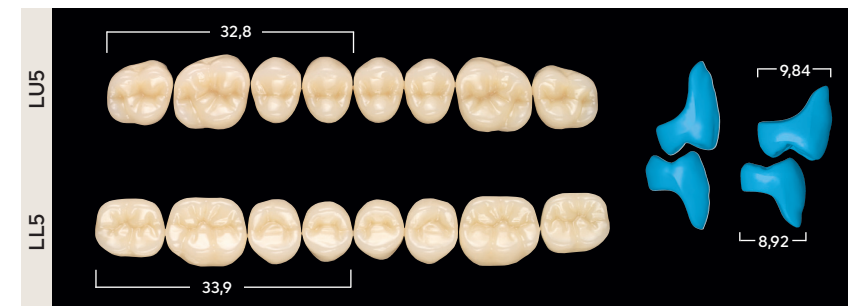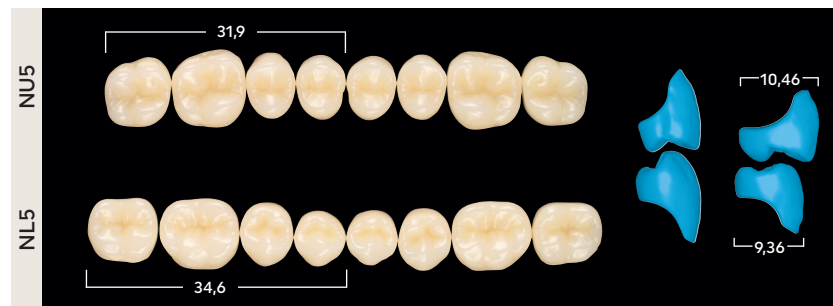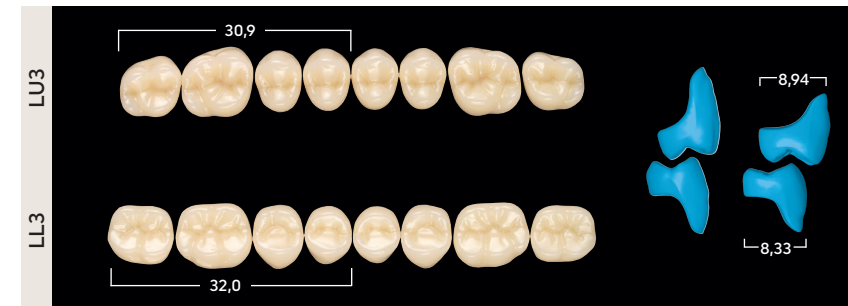

Instructions d'utilisation

Teintes

- 16 teintes A–D
- 4 teintes Bleach

Choix de la teinte

Le relevé de teinte est effectué à l'aide du teintier SR Phonares II.



Les pîges du teintier SR Phonares II présentent la même structure et sont constituées du même matériau que les dents de cette gamme.

La teinte choisie à l'aide de ce teintier sera donc parfaitement respectée.

La prise de teinte sur le patient doit être effectuée dans des conditions de lumière précises (5 500 K température de couleur) ou à la lumière du jour (lumière venant du nord de préférence).

Épaisseur minimale

Afin de conserver la solidité des dents et l'effet de teinte approprié, il est recommandé de respecter les épaisseurs minimales conseillées.

- Dents antérieures : min. 2,5 mm
- Dents postérieures : Sillon central min. 2,0 mm, pointes cuspidiennes min. 2,5 mm, zone cervicale min. 2,5 mm.

Important

Afin de garantir la fonctionnalité à long terme des prothèses amovibles en bouche, il convient de respecter les principes suivants :

- **Les matériaux dentaires ne peuvent être mis en œuvre que par des professionnels de l'art dentaire.**
- **Fabrication au laboratoire dentaire selon les principes de la meilleure pratique.**
- Pour assurer une liaison fiable entre les dents en PMMA/composite et la résine de base, nettoyer les dents à la vapeur, les dépolir et appliquer du monomère. Lors de l'utilisation d'une résine autopolymérisante pour la finition, il est recommandé de créer en supplément des rétentions mécaniques.
- Les dents ne doivent pas entrer en contact avec une flamme ou une source de chaleur directe (par exemple, un chalumeau à alcool).
- Éviter le développement de chaleur consécutif à une trop grande pression lors du grattage.
- Éviter le contact avec les solvants.

Tableau de combinaisons

		SR Phonares II		SR Phonares II Typ	SR Phonares II Lingual
		Dents antérieures		Dents postérieures	
		maxillaire	mandibulaire	maxillaire/ mandibulaire	maxillaire/ mandibulaire
Petites	Douce	S61	L50, L51	NU3/NL3	LU3/LL3
		S71	L50, L51	NU3/NL3, NU5/NL5	LU3/LL3, LU5/LL5
		S81	L50, L51	NU3/NL3	LU3/LL3, LU5/LL5
	Marquées	B61	L50, L51	NU3/NL3	LU3/LL3
		B71	L50, L51	NU3/NL3, NU5/NL5	LU3/LL3
		B81	L50, L51	NU3/NL3	LU3/LL3
Moyennes	Douce	S62	L52, L53	NU3/NL3, NU5/NL5	LU5/LL5
		S72	L52, L53	NU5/NL5	LU5/LL5, LU6/LL6
		S82	L52, L53	NU5/NL5	LU5/LL5, LU6/LL6
	Marquées	B62	L52, L53	NU3/NL3, NU5/NL5	LU5/LL5, LU6/LL6
		B72	L52, L53	NU3/NL3, NU5/NL5	LU5/LL5, LU6/LL6
		B82	L52, L53	NU3/NL3, NU5/NL5	LU3/LL3, LU5/LL5
Grandes	Douce	S63	L54, L55	NU5/NL5	LU6/LL6
		S73	L54, L55	NU5/NL5, NU6/NL6	LU6/LL6
		S83	L54, L55	NU5/NL5, NU6/NL6	LU6/LL6
	Marquées	B63	L54, L55	NU6/NL6	LU6/LL6
		B73	L54, L55	NU6/NL6	LU6/LL6
		B83	L54, L55	NU5/NL5, NU6/NL6	LU6/LL6

Ce tableau de combinaisons est recommandé à titre indicatif. En cas de conditions anatomiques particulières, des écarts sont possibles. L'offre peut varier selon les pays.

CE 0123

EN ISO 22112:2017 (D)

Date de la préparation de l'information :
2023-06/Rev. 1

Les descriptions et les données fournies ne sont pas des garanties ni des engagements.
AD1023 - RCS Annecy B 326 420 544 - Imprimé en France

SR Phonares est un dispositif médical de Classe IIA / CE0123 fabriqué par Ivoclar Vivadent AG. Vous êtes invités à lire attentivement les instructions figurant dans la notice qui accompagne ce dispositif médical ou sur l'étiquetage. Ce dispositif médical n'est pas remboursé par les organismes d'assurance maladie.

Ivoclar Vivadent SAS | 168 rue des Savoies | 74330 Epagny Metz-Tessy | France
Tel. +33 4 50 88 64 00 | Fax +33 4 50 68 91 52

ivoclar.com