

Un appareil, 2 modes
un protocole simplifié



Labolight DUO de GC

Unité de photo-polymérisation
LED mode dual
pour résine composite indirecte



GC

GC Labolight DUO

Les jours où vous aviez besoin de deux unités de polymérisation dans votre laboratoire (un pour l'intermédiaire et un autre pour la photo-polymérisation finale) appartiennent au passé. GC offre maintenant un dispositif de photo-polymérisation multi-fonctionnel pour le prothésiste dentaire combinant 2 modes de durcissement : pré photo-polymérisation (step cure) et photo-polymérisation finale (full mode)



Avec les dernières technologies LED

Equipé de la technologie LED double longueur-d'ondes, le Labolight DUO peut être utilisé en toute sécurité pour tous les composites GC :


Large longueur-d'ondes de 380nm-510nm avec des pics :

- 465nm-485nm (12 LED bleue)
- 390nm-400nm (3 LED violette)

Cette technologie assure un durcissement optimal de tous les matériaux dentaires photo-polymérisables, et sa puissance réduit les cycles de photo-polymérisation.

Système rotatif automatique

La plaque réfléchissante répartit la lumière de manière efficace dans toutes les directions. Le plateau de photo-polymérisation permet un positionnement précis des pièces pendant le cycle de photo-polymérisation.

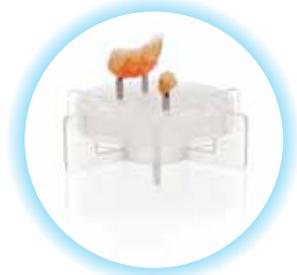

Un style épuré contemporain & ergonomique

Le GC Labolight DUO est non seulement capable de traiter plus de travail mais en plus, il est élégant. Son style contemporain a été récompensé, ses surfaces lisses permettent un nettoyage facile et son encombrement est réduit. Une conception conviviale : l'interface est simple et intuitive et les parties internes sont facilement accessibles grâce à sa large ouverture.



Step mode



Full mode



GC EUROPE N.V.

Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info@gceurope.com
http://www.gceurope.com

GC BENELUX B.V.

Edisonbaan 12
NL-3439 MN Nieuwegein
Tel. +31.30.630.85.00
Fax. +31.30.605.59.86
info@benelux.gceurope.com
http://benelux.gceurope.com

GC FRANCE s.a.s.

8 rue Benjamin Franklin
F-94370 Sucy en Brie Cedex
Tel. +33.1.49.80.37.91
Fax. +33.1.49.80.37.90
info@france.gceurope.com
http://france.gceurope.com

GC AUSTRIA GmbH

Swiss Office
Bergstrasse 31c
CH-8890 Flums
Tel. + 41.81.734.02.70
Fax. +41.81.734.02.71
info@switzerland.gceurope.com
http://switzerland.gceurope.com

